

SCREW NEEDLE

Adjust. Inject. Perfect.

섬세한 시술을 완성하는 디테일.
전문가를 위한 프리미엄 니들의
새로운 기준.



프로페셔널을 위한 단 하나의 선택

“시술 깊이, 이제 손끝에서 정밀하게 조절하세요”

시술의 정밀함을 완성하다

길이가 고정된 기존 니들과 달리,
회전형 허브캡 구조를 통해
0~4mm까지 실시간 길이 조절이 가능합니다.

시술 부위별로 상이한 피부 두께에 맞춰
깊이를 섬세하게 설정할 수 있어,
약물의 전달 효율은 물론 시술자의 편의성과
환자 만족도를 극대화합니다.

필러, 보툴리눔 등 다양한 미용약물주입 뿐 아니라
정밀한 주입 컨트롤이 필요한 모든 미용의료 시술에
이상적인 솔루션입니다.

제품 라인업

게이지	34G	33G	32G	31G	29G	27G
색상						
외경	0.178	0.203	0.229	0.254	0.324	0.400
내경	0.110	0.110	0.150	0.150	0.230	0.310
ISO	ETW	TW	UTW	ETW	TW	TW
비고	★ NEW	★ NEW	★ NEW			



정확한 깊이 조절

개인별/부위별 맞춤 전달



약물 효과 향상

정확한 전달, 적은 낭비




시술 시간 단축

교체 없는 조절로 빠른 프로세스

Johns Screw Needle의 차별성


- 세계 최초로 길이 조절이 가능한 바늘 (조절 가능 범위 0~4mm)
- 진피층 수직 정밀 주입에 최적화
- 한국 특허/PCT 출원 진행 중
- 주로 히알루론산 필러 및 메조 필러 주입에 사용
- 모든 유형의 주사기에 적합 (최대 10ml 크기)

수직 주입

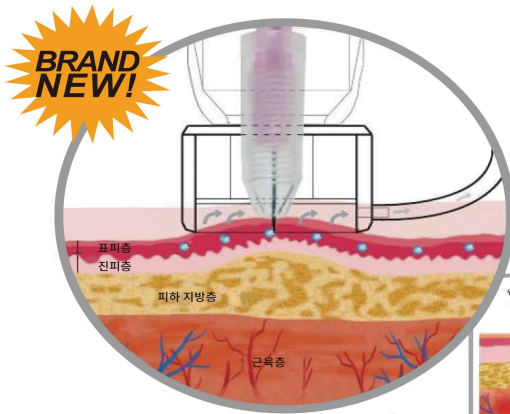


메조 필러

수직 주입

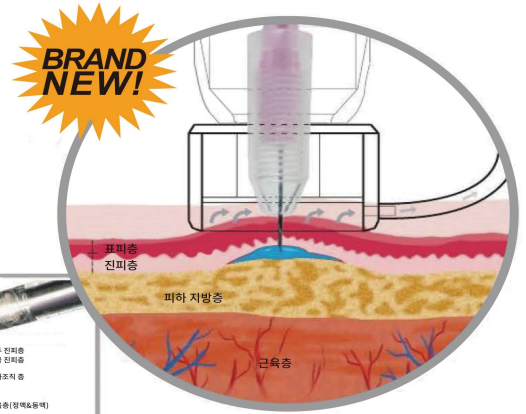

히알루론산 필러

수평 주입

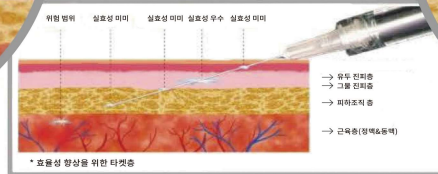

Johns Screw Needle의 세부 규격

전체 길이	바늘 길이	조절 가능 범위	종류	원자재
30mm	7mm	0~4mm	27G(Grey) 29G(Red) 31G(White)	스테인리스강 (바늘) 폴리프로필렌 (핸들)
			32G(Deep Green) 33G(Black) 34G(Orange)	

사용 시 주의 사항

- 포장에 손상된 경우 사용하지 마십시오.
- 사용 후 바늘을 적합한 용기에 버리십시오.
- 일회용 제품. 재사용 하지 마십시오.
- 사용 여부와 관계없이 바늘은 어떤 이유에서도 재멸균 될 수 없습니다.



27G x 7mm
(조절 가능 범위 0~4mm)
100 Needles



29G x 7mm
(조절 가능 범위 0~4mm)
100 Needles



31G x 7mm
(조절 가능 범위 0~4mm)
100 Needles



32G x 7mm
(조절 가능 범위 0~4mm)
100 Needles



33G x 7mm
(조절 가능 범위 0~4mm)
100 Needles



34G x 7mm
(조절 가능 범위 0~4mm)
100 Needles